



# INSTRUMENTENREINIGUNG UND DESINFEKTION

## Anios'Clean Excel D

### DESINFIZIERENDER REINIGER FÜR MEDIZINPRODUKTE

- Patentiertes Wirkstoffkonzept
- Synergistische Wirkstoffkombination aus QAV und Chlorhexidindigluconat
- Nicht korrosiv, kompatibel mit einer Vielzahl von Materialien




# Anios'Clean Excel D

Desinfizierender Reiniger für Medizinprodukte


## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Klare, blaue Lösung
- pH-Wert des Konzentrates: min 6,5 - max 7,5
- pH-Wert bei 0,5% in Leitungswasser: 7,4
- pH-Wert bei 0,5% in weichem Wasser: 7,6
- pH-Wert bei 0,5% in demineralisiertem Wasser: 6,6

## GEBRAUCHSANWEISUNG

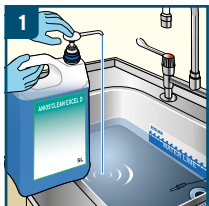


1. Konzentrierte Lösung. Entlüften Sie ggf. eine dazugehörige Pumpe vor dem ersten Gebrauch. Zum Einweichen die erforderliche Verdünnung unter Einhaltung der Mindestkontaktzeit von 5 Minuten verwenden.

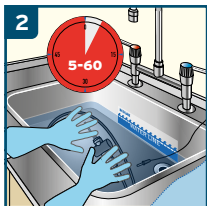

2. Tauchen Sie das Medizinprodukt vollständig ein. Halten Sie das Einweichbad während der Kontaktzeit bedeckt. Bei sichtbaren Verunreinigungen bürsten oder anderweitig, mechanisch reinigen.



3. Die behandelten Medizinprodukte gut mit Wasser abspülen, um jegliche Produktrückstände und organischen Verunreinigen zu entfernen.

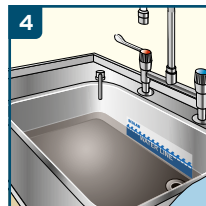

4. Die Lösung erneuern, wenn sie sichtbar verunreinigt ist, oder mindestens einmal täglich, um die anhaltende Wirksamkeit des Produkts zu gewährleisten.

## MIKROBIOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

WIRKSAMKEIT	KONZENTRATION	KONTAKTZEIT
Bakterizid* gemäß EN 13727/EN 14561	0,5%	5 min
Levurozid* gemäß EN 13624/EN 14562	0,5%	15 min
Tuberkulozid* gemäß EN 14348/EN 14563	2,0%	60 min
Begrenzt Viruzid gemäß EN 14476/EN 17111	0,5%	15 min
Wirksam gegen Polyomavirus SV40* gemäß EN 14476/EN 17111	2%	60 min
Gemäß VAH (bakterizid*, levurozid*)	1,5%	15 min

\*= hohe Belastung

## VERPACKUNGS- UND BESTELLINFORMATIONEN

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
Anios'Clean Excel D	12 x 1 L Flaschen	3119700
Anios'Clean Excel D	2 x 5 L	3119740



LABORATOIRES ANIOS  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

Vertrieb durch:  
ECOLAB SCHWEIZ GMBH  
Kägenstrasse 10  
4153 Reinach  
Schweiz

## ANWENDUNGSBEREICH

Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten, wie z.B.: chirurgische und medizinische Instrumente, thermolabile Materialien wie z.B. Endoskope vor der Sterilisation.

## GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Konzentrierte Lösung. Entlüften Sie ggf. eine dazugehörige Pumpe vor dem ersten Gebrauch. Zum Einweichen die erforderliche Verdünnung unter Einhaltung der Mindestkontaktzeit von 5 Minuten verwenden.
2. Tauchen Sie das Medizinprodukt vollständig ein. Halten Sie das Einweichbad während der Kontaktzeit bedeckt. Bei sichtbaren Verunreinigungen bürsten oder anderweitig, mechanisch reinigen.
3. Die behandelten Medizinprodukte gut mit Wasser abspülen, um jegliche Produktrückstände und organischen Verunreinigen zu entfernen.
4. Die Lösung erneuern, wenn sie sichtbar verunreinigt ist, oder mindestens einmal täglich, um die anhaltende Wirksamkeit des Produkts zu gewährleisten.

## INHALTSSTOFFE

Didecyldimethylammoniumchlorid, Chlorhexidindigluconat, nichtionische Tenside, Duftstoff, Farbstoff, Hilfsstoffe.

## LAGERUNG

Gefahrgut - Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch (erstellt gemäß den geltenden europäischen Vorschriften für die Einstufung und Kennzeichnung chemischer Produkte) Lagerung zwischen + 5°C und + 25°C.

## GUTACHTEN

Medizinprodukt. Die vollständige antimikrobielle Wirksamkeit von Anios Clean Excel D ist im wissenschaftlichen Dossier enthalten. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

## MEDIZINPRODUKTE SICHER VERWENDEN

Bitte lesen Sie die Hinweise und Informationen auf dem Etikett und dem Produktdatenblatt.



NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.



www.ecolab.com