



# DESINFEKTIONSMITTEL- REINIGUNGSSCHAUM FÜR MEDIZINISCHE UND CHIRURGISCHE INSTRUMENTE

## Aniosyme Prime

### REINIGUNG UND DESINFEKTION MEDIZINISCHER PRODUKTE


- Dreifach-Enzym-Formel
- Verhindert das Eintrocknen des Untergrundes
- Antimikrobielle Wirksamkeit ab 15 min
- Keine Aerosolbildung
- Nicht korrosiv gegenüber Materialien




# Aniosyme Prime

Reinigung und Desinfektion medizinischer Produkte


## GEBRAUCHSANWEISUNG

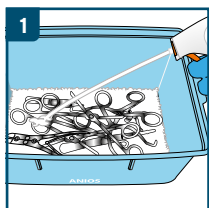

1. Besprühen Sie zunächst den Boden der Instrumentenwanne mit Aniosyme Prime und platzieren Sie dann die gesammelten Instrumente.

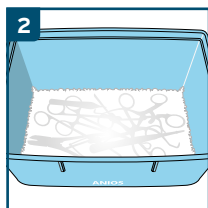

2. Benetzen Sie alle Instrumente mit dem Schaum. Mindesteinwirkzeit: 15 Minuten. Bei tuberkulozider Aktivität 30 Minuten Einwirkzeit einplanen.

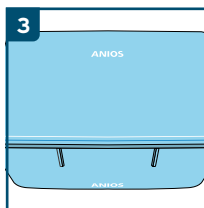

3. Decken Sie den Behälter mit einem Deckel ab.



4. Spülen Sie die behandelten medizinische Instrumente gründlich mit Leitungswasser ab, um alle Produktpuren und organische Verschmutzungen vor der maschinellen oder manuellen Reinigung zu entfernen.

## MIKROBIOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

| ANFORDERUNGEN/BEDINGUNGEN                             | EINWIRKZEIT |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Bakterizid*<br>Nach EN 13727 und EN 14561             | 15 min      |
| Levurozid*<br>Nach EN 13624 und EN 14562              | 15 min      |
| Tuberkulozid*<br>Nach EN 14348 und EN 14563           | 30 min      |
| Mykobakterizid*<br>Nach EN 14348 und EN 14563         | 60 min      |
| Aktiv gegen behüllte Viren*<br>Nach EN 14476/EN 17111 | 15 min      |

\*=hohe Belastung

## VERPACKUNGS- UND BESTELLINFORMATION

| PRODUKT        | VERPACKUNGSEINHEIT   | ARTIKELNUMMER |
|----------------|----------------------|---------------|
| Aniosyme Prime | 12 x 750 mL Flaschen | 3103230       |



**LABORATOIRES ANIOS**  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France



**ECOLAB (SCHWEIZ) GMBH**  
Kägenstrasse 10  
CH-4153 Reinach  
Schweiz



**ECOLAB EUROPE GMBH**  
Hofwiesenstrasse 349  
CH-8050 Zurich  
Schweiz

## ANWENDUNGSGEBIET

Reinigungs- und Desinfektionsschaum zur Vorbehandlung medizinischer Produkte: für die Trockenentsorgung und Aufbewahrung benutzter medizinischer Produkte vor der maschinellen oder manuellen Reinigung. Das Produkt sorgt für ausreichende Feuchtigkeit und verhindert das Antrocknen von Blut und anderen organischen Verunreinigungen.

## GEBRAUCHSANWEISUNG

### Gebrauchsfertige Lösung.

1. Besprühen Sie zunächst den Boden der Instrumentenwanne mit Aniosyme Prime und platzieren Sie dann die gesammelten Instrumente.
2. Benetzen Sie alle Instrumente mit dem Schaum. Mindesteinwirkzeit: 15 Minuten. Bei tuberkulozider Aktivität 30 Minuten Einwirkzeit einplanen.
3. Decken Sie den Behälter mit einem Deckel ab.
4. Spülen Sie die behandelten medizinische Instrumente gründlich mit Leitungswasser ab, um alle Produktpuren und organische Verschmutzungen vor der maschinellen oder manuellen Reinigung zu entfernen.

Nicht geeignet für Instrumente aus Zink oder Eisen.

## INHALTSSTOFFE

Quartäres Ammoniumcarbonat, nichtionische Tenside, Enzyme (Proteasen, Lipasen und Amylasen), Komplexbildner und Hilfsstoffe.

## LAGERUNG

Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch (erstellt nach den geltenden europäischen Vorschriften für die Klassifikation und Kennzeichnung chemischer Produkte). Lagerung zwischen +5°C und +25°C.

## GUTACHTEN

Medizinprodukt. Nachweis des kompletten Wirkspektrums von Aniosyme Prime in der Gutachtenmappe, erhältlich auf Anfrage.

## MEDIZINPRODUKTE SICHER VERWENDEN

Bitte lesen Sie das Etikett und die Produktinformation.



NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.



www.ecolab.com