

# SERIE 4

rapide, sûre, efficace



sélectionné par :

**Soluscope**

**UGAP**  
L'ACHAT PUBLIC

# SERIE 4

Une machine

# Intuitive



## *Le contrôle au bout de vos doigts*

### UNE INTERFACE TACTILE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

Pour une utilisation facile, rapide et conviviale le nouvel écran tactile 7" et son interface intuitive par icône offre un accès fluide et agréable à toutes les fonctions en un seul geste.

### UNE MANIPULATION SIMPLE ET PRÉCISE UNE CUVE, UN ENDOSCOPE

Des ouvertures sécurisées.  
Un accès facilité aux filtres et à la chimie.

### UN "MONITORING" INTUITIF ET COMPLET DES DONNÉES DE TRAÇABILITÉ

Une gestion de l'information, intégrée, entièrement automatisée, avec enregistrement et sauvegarde des données.

### UNE MANIPULATION RÉDUITE DE L'ENDOSCOPE

Une connectique dédiée qui assure la continuité du traitement de l'endoscope en évitant toute manipulation inutile au cours du circuit de retraitement. La Serie 4 PA accueille toutes les marques d'endoscopes flexibles.

conforme au marquage CE et à la norme EN ISO 15883-1&4



Un procédé

# Intégré

*Alliance de concepts uniques  
pour plus de performance*

#### UNE MACHINE COMPACTE ET MOBILE

La Serie 4 PA, par sa petite taille et sa facilité d'installation, répond parfaitement à toutes les exigences d'agencement et d'accessibilité. Tous les éléments (filtres, chimie, imprimante, lecteur code-barres) sont intégrés de façon optimale permettant un renouvellement simplifié.

#### UNE MACHINE ROBUSTE ET FIABLE

Un double contrôle permanent des points critiques du cycle, validé par des alarmes, assure une fiabilité optimale. Un test continu d'étanchéité vérifie l'intégrité de la gaine pour une sécurité garantie de votre endoscope.




# *laveur-désinfecteur d'endoscopes flexibles*



Un concept

# Innovant

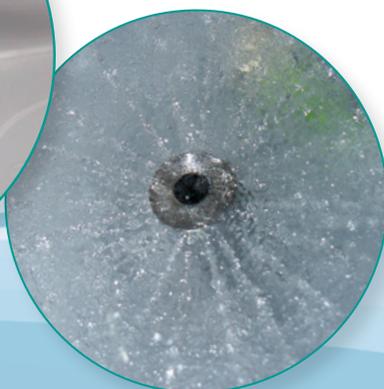

## *Le meilleur de la technologie Soluscope*

### UN PROCÉDÉ UNIQUE ET BREVETÉ DE SEMI-ASPERSION/IMMERSION

Le traitement par immersion combiné à l'aspersion de l'endoscope par des jets puissants assure une action mécanique supplémentaire permettant d'optimiser le temps de cycle et l'efficacité de nettoyage.

### UNE NOUVELLE FORMULATION DE CHIMIE

Moins de produit chimique pour des résultats optimums.  
Un désinfectant tout-en-un et un temps de contact réduit à 3 minutes.

### UNE MACHINE PLURI-ÉCONOMIQUE

Concentré d'innovation, la *Serie 4 PA* allie économie de temps, de ressources et d'argent. Soucieuse de son environnement, la *Serie 4 PA* permet une réduction conséquente de la consommation d'eau et de produits chimiques. Ses coûts associés sont nettement réduits.

### UNE PRÉCISION AUTORÉGULÉE, REPRODUCTIBLE ET BREVETÉE

Devenu un standard de fiabilité et de performance, le contrôle volumétrique des canaux *Soluscope*, permet un monitoring continu du traitement de chaque canal individuellement. Ainsi, la *Serie 4 PA* répond parfaitement aux normes internationales tout en garantissant la sécurité des patients, des opérateurs et des endoscopes.



# La chimie

## UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE PRODUITS CHIMIQUES

Une chimie dédiée et à usage unique. Sécurité et compatibilité prouvées pour toutes les marques d'endoscopes flexibles.

## FORMULATION ET CONCENTRATION ADAPTÉES AU PROCÉDÉ UNIQUE DE LA SÉRIE 4 PA

Le détergent *Soluscope CLN* lutte activement et efficacement contre biofilm et protéines. Ne mousse pas. Le désinfectant *Soluscope PAA* tout-en-un autorise une efficacité totale.

## TEMPÉRATURE ET TEMPS DE CONTACT OPTIMISÉS

*Soluscope PAA* à un temps de contact de 3 minutes seulement avec votre endoscope. Un dosage minimum à basse température suffit pour garantir sa pleine efficacité, rallongeant ainsi la durée de vie de l'endoscope.



# Les connectiques

Fort de plus de 25 années de collectes de données, la gamme de connectiques *Soluscope* est adaptée à la plupart des modèles et marques d'endoscope. Les connectiques assurent un lien sûr et efficace entre les machines

*Soluscope* et vos endoscopes.



# Une solution complète à votre service

## TRANSPORT

Le *Soluscope Trolley* est spécialement conçu pour transporter les endoscopes de la salle de désinfection à la salle d'examen. Le bac spécifique équipé d'un couvercle transparent garantit un transport sécurisé de l'endoscope.

La solution de transport *Soluscope* facilite au quotidien l'organisation de votre travail de manière sécurisée.

## STOCKAGE

Le *Soluscope Rack* peut stocker jusqu'à 10 bacs dans un espace réduit.

## SERVICES

*Soluscope* vous propose une offre complète de services (maintenance, service après-vente, formation), pour vous faire bénéficier de son expérience de plus de 25 ans dans l'hygiène de l'endoscope.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité par cycle	1 endoscope par semi immersion
Temps de cycle de retraitement	16 minutes (cycle 1)
Température de retraitement	35 à 40°C
Temps de contact / désinfection	3 minutes
Traçabilité	Lecteur code-barres - imprimante - carte mémoire - IT Soluscope (option)
Connexion électrique	1 x 220-240 V avec disjoncteur différentiel 30mA
Fréquence d'alimentation	50 ou 60 Hz
Arrivée d'eau	Eau de réseau
Pression d'eau	< 4 bars (58 psi) avec réducteur de pression
Débit d'arrivée d'eau	4 L / min minimum
Dureté de l'eau	10 à 30 TH (100 à 300 mg / L CaCO <sub>3</sub> )
pH de l'eau	6,5 à 9
Fouling index	< 3
Eau osmosée	sur demande
Dimensions (L x P x H)	63,8 x 122 x 159,2 cm (capot et tiroir ouverts) 63,8 x 87,5 x 109,6 cm (capot et tiroir fermés)
Poids à vide	107 Kg
Poids en charge	135 Kg

# Gestion de données

La *Serie 4 PA* est compatible avec la solution de traçabilité globale *IT Soluscope* qui fournit un accès en temps réel à l'état de vos endoscopes et automatisent la gestion de votre traçabilité.





## LA SOLUTION COMPLÈTE SOLUSCOPE

Autour du cycle de retraitement des endoscopes flexibles, efficace et certifiée à chaque étape, cette solution complète offre des résultats optimums et une totale fiabilité.

Ceci en toute sérénité pour l'opérateur, le patient et vos endoscopes.



[www.soluscope.com](http://www.soluscope.com)

Soluscope SAS : 100, rue du Fauge - Z.I. Les Paluds - 13400 Aubagne - France

☎ +33 (0)4 91 83 21 22 📠 +33 (0)4 91 83 21 10 ✉ info@soluscope.com

Tous les produits fabriqués par *Soluscope* répondent aux normes européennes et internationales les plus récentes et les plus exigeantes. Certifiée *ISO 9001 version 2015* & *ISO 13485 version 2016*, *Soluscope* s'engage et se mobilise en permanence dans l'objectif constant de la satisfaction de ses clients.

distribué par  
**ECOLAB (SCHWEIZ) GmbH**  
 Kägenstrasse 10  
 4153 Reinach  
 +41(0)61-466-94-66  
[www.ecolabhealthcare.ch/f](http://www.ecolabhealthcare.ch/f)