



**REINIGEN.
KANN SO PUR UND EINFACH SEIN!**

Sekusept™ Pure Clean

MANUELLE VORREINIGUNG VON MEDIZINPRODUKTEN INKLUSIVE FLEXIBLER ENDOSKOPE

Reinigung medizinischer Instrumente und Endoskope ist die Grundvoraussetzung für eine effektive Desinfektion. Sekusept™ Pure Clean hilft dank seiner Kombination von Inhaltsstoffen, eine Nachreinigung von Instrumenten zu vermeiden die im medizinischen Bereich üblichen Anschmutzungen (z.B. Blut, Proteine, Serum) verunreinigt sind.

Sekusept™ PureClean ist auch:

- Schnell wirksam
- Gründlich in der Reinigung
- Wirtschaftlich durch geringe Anwendungskonzentration



Sekusept™ Pure Clean

Manuelle Vorreinigung von Medizinprodukten inklusive flexibler Endoskope

EFFEKTIV

Sekusept™ PureClean bietet einen hohen Reinigungsstandard und ist besonders effektiv gegen die typischen Verunreinigungen im medizinischen Bereich. Seine Reinigungsleistung wurde mit anderen marktüblichen Reinigern verglichen und mit hervorragenden Ergebnissen bewertet (siehe Grafik).

Die einzigartige Zusammensetzung der Inhaltsstoffe reinigt verschmutzte Instrumente oft schon so effektiv, dass sich der Aufwand der Vorreinigung reduziert und eine Nachreinigung vermieden wird.

PRAKTISCH


Sekusept™ PureClean ist hellblau gefärbt, um anzuzeigen, dass das Produkt angewandt worden ist. Die geringe Schaumentwicklung des Produktes ermöglicht eine gute Sichtbarkeit während der Reinigungsvorgänge.

WIRTSCHAFTLICH

Sekusept™ PureClean kann in niedriger Konzentration von 0,3% (3ml/L) bis 1% (10ml/L) eingesetzt werden. So kommt weniger chemisches Produkt während der Reinigung zum Einsatz.

*Vergleich der Reinigungseffizienz

Sekusept™ PureClean vs. aktuell auf dem Markt befindlichen Produkten. Die Produkte wurden bei einer Konzentration von 0,5% und zwei Minuten Einwirkzeit ohne mechanische Reinigung getestet.

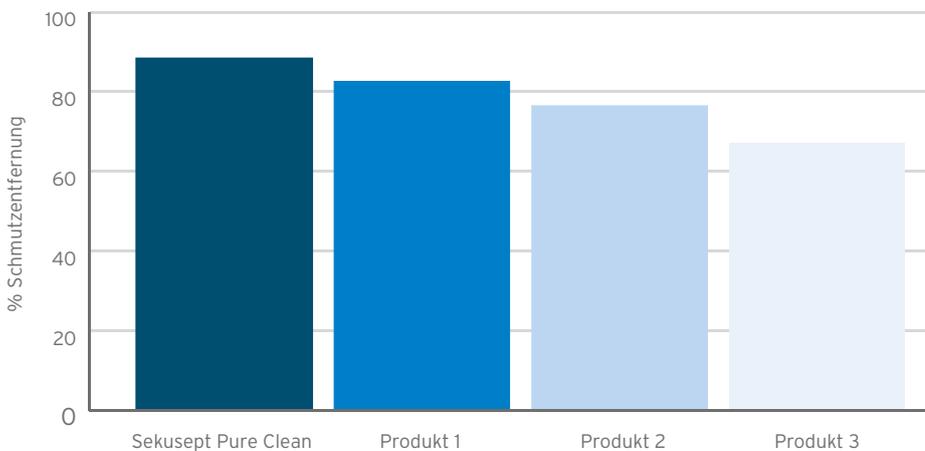

BESTELLINFORMATIONEN

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
Sekusept™ PureClean Griffflasche mit Messbecher	4 x 2 Liter	30 809 20
Sekusept™ PureClean Kanister	1 x 6 Liter	30 809 40

ANWENDUNGSBEREICH

Für die manuelle Reinigung von medizinischen Instrumenten inklusive flexibler Endoskope und deren Zubehör, zum Beispiel chirurgische Instrumente, starre Endoskope, MIC - Instrumente.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Je nach Art und Grad der Verschmutzung eine Lösung von 0,3% (3ml/L) - 1% (10ml/L) mit Wasser von mindestens Trinkwasserqualität herstellen. Instrumentarium einlegen, auf vollständige Benetzung achten. Instrumente unter Berücksichtigung der Herstelleranweisung reinigen, einschliesslich Mechanik (z.B.: bürsten, wischen) bis visuell sauber. Bei Anwendung im Ultraschallbad das Bad während der Beschallung abdecken.

Mit Wasser von mindestens Trinkwasserqualität abspülen. Anschliessend Aussenflächen, insbesondere die Hohlräume (z.B. bei Endoskopkanälen), trocknen.

INHALTSSTOFFE

Nichtionische Tenside, Komplexbildner, pH-Regler, Booster und Farbstoffe.

LAGERUNG

Gefährlich - beachten Sie die für den Gebrauch (erstellt nach den geltenden europäischen Vorschriften zur Einstufung und Kennzeichnung von chemischen Produkten). Lagerung: zwischen +0°C und +25°C.

GUTACHTEN

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

SICHERE VERWENDUNG VON MEDIZINPRODUKTEN

Lesen Sie die Hinweise und Informationen auf Etiketten und Produktdatenblatt.



NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH